

PROFI MUSKEL- MASSAGEGERÄT

Art.-Nr. 227182



 wellcraft®

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ


BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie vor der Verwendung unbedingt das Benutzerhandbuch

Inhalt

- wellcraft Profi-Muskelmassagegerät
- Integrierte 12V Lithium-Ion Batterie
- 5 Massageköpfe
- USB Typ-C


Beschreibung

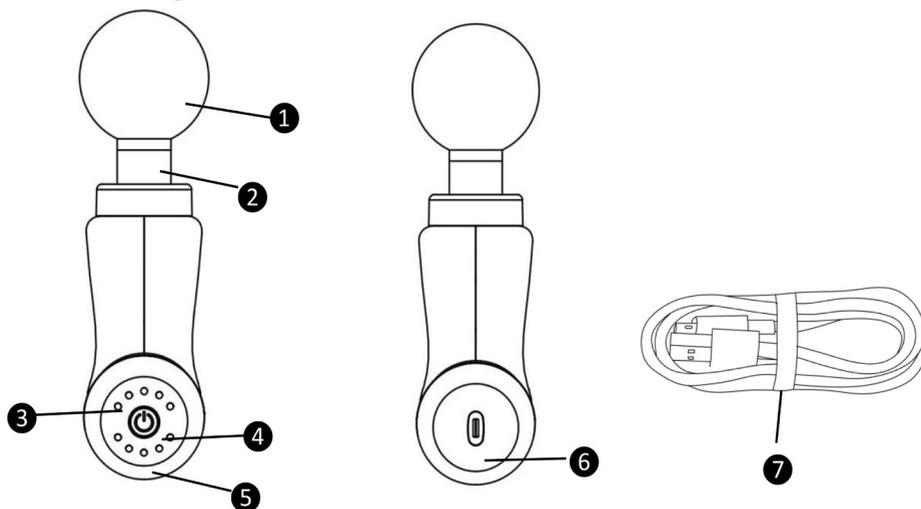


- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | Auswechselbares Zubehör | 5 | LED-Batterieanzeige |
| 2 | Schnellverschluss | 6 | USB-Anschluss Typ C |
| 3 | LED-Geschwindigkeitsanzeige | 7 | USB Typ-C |
| 4 | Ein- / Ausschalter | | |

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwendung

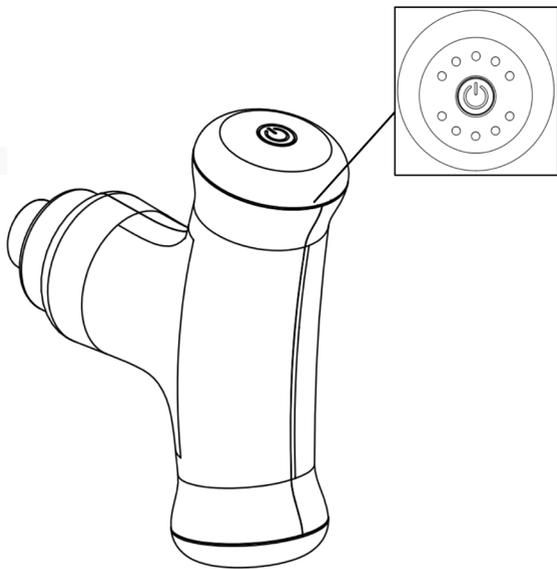


1. Drücken Sie die Power-Taste **4** länger, um die Massagepistole einzuschalten.
2. Drücken Sie die Netztaste **4**, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Netztaste **4** zum Ausschalten.
4. Setzen Sie den gewünschten Massagekopf in die Aufnahme ein und sichern Sie den Kopf durch Drehen im Uhrzeigersinn um 180-360 Grad sichern.

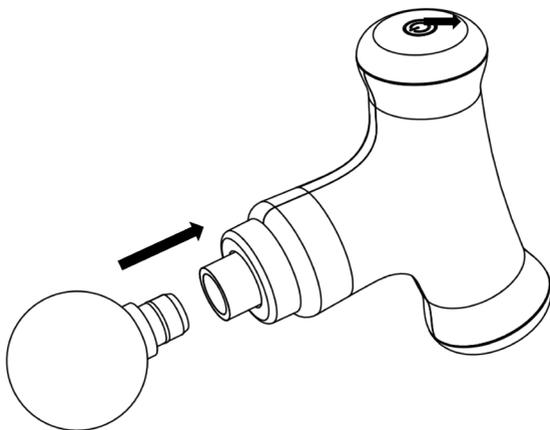

BEDIENUNGSANLEITUNG

Laden des Geräts

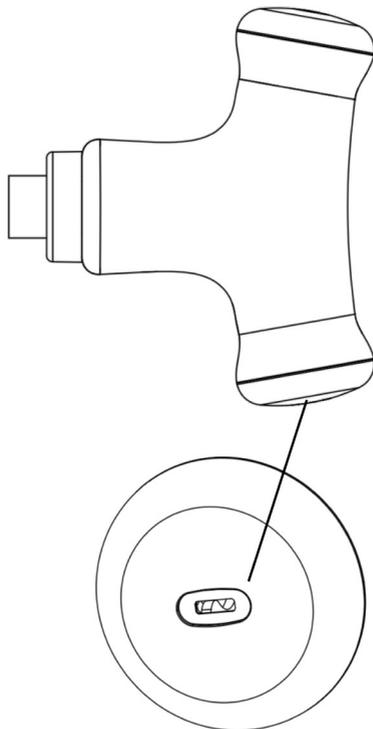


1. Schalten Sie die Massagepistole aus und schliessen Sie sie an eine Stromversorgung von 220V an. Für dieses Gerät ist eine USB-Ladestation Typ C **6** verfügbar.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Batterieanzeige **5** und leuchtet, bis sie voll ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Auswechselbares Zubehör

RUNDKOPF

Für grosse Muskelgruppen wie Gesässmuskel und Quads.

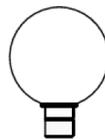


SCHAUFELFÖRMIGER KOPF

Für kleinere Muskelgruppen (allgemeine Verwendung)



FLACHKOPF

Für beliebige Körperteile.

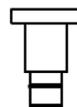

U-FÖRMIGER KOPF

Für die Wirbelsäule und den Hals.



KUGELKOPF

Für Triggerpunkte und Gelenke



Warnunghinweise und Tipps

- Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern, lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch. Bei Verletzungen den Gebrauch sofort einstellen.
- Nur für Erwachsene, von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Von Flüssigkeit und Wärmequellen fernhalten.
- Lüftungsöffnungen frei von Staub und Ablagerungen halten.
- Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät während des Aufladens nicht zur Massage verwenden.
- Versuchen Sie nicht, Schrauben zu entfernen und das Gerät zu zerlegen.
- Wir empfehlen, die Massagepistole nicht länger als 1 Stunde ununterbrochen zu benutzen. Lassen Sie sie vor dem erneuten Einsatz 30 Minuten ruhen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf weichem Gewebe, nicht auf dem Kopf oder anderen knöchernen Regionen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf trockener Haut und Kleidung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Es wird empfohlen, das Gerät über der Kleidung zu verwenden (z.B. Sportkleidung, Turnkleidung, Leggings).
- Halten Sie Haare und Finger von Verbindungspunkten fern, da Säcken im Produkt eingeklemmt werden können.

WICHTIGE BENUTZUNGSHINWEISE

Die LCD-Geschwindigkeitsanzeige zeigt die Massagestärke an, die von dem auf das Gerät ausgeübten Druck abweicht. Es wird empfohlen, nicht mehr als 25 kg Druck auszuüben, da der Überlastungsschutz den Strom für 5 Sekunden abschaltet und automatisch neu startet, wenn der ausgeübte Druck zu stark ist. Kontrollieren Sie häufig Massagebereiche und stellen Sie die Anwendung sofort bei den ersten Anzeichen von Schmerzen und Unwohlsein ein.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Masse	147 x 160 x 87 mm
Batterie	Lithium-Ion
Batterieleistung	Bis zu zwei Stunden (je nach verwendeter Geschwindigkeit)
Leistung	900 mAh 12 V
Geschwindigkeit	5 Geschwindigkeitsstufen bis zu 2800 U/min
Geräuschentwicklung	Etwa 60 DB bei maximaler Geschwindigkeit

Periodisches Laden des Akkus

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.